

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**В** о время использования массажера, необходимо соблюдать меры предосторожности описанные далее.

## ОПАСНО!

Во избежание поражения электрическим током необходимо:

- \* всегда отключать массажер от питания сразу же после использования
- \* не пытайтесь достать массажер попавший по случайности в воду.
- \* не используйте в ванной или бане.
- \* Не храните массажер в месте, где он может упасть. не помещайте его в воду или другие жидкости

## ВНИМАНИЕ

Во избежание возгораний, поражения электрическим током необходимо:

- \* быть внимательным и не оставлять без присмотра. Отключайте от сети когда массажер не используется
- \* запрещается использовать под одеялом или подушкой. Чрезмерное нагревание может привести к возгоранию, поражению током и травмам
- \* необходим непосредственный присмотр когда массажер используется детьми, инвалидами или людьми с ограниченными возможностями
- \* массажер должен использоваться только по назначению. Не используйте приспособления не предусмотренные производителем
- \* запрещается использовать массажер в случае поврежденного кабеля или кнопки включения, если массажер работает неправильно, подвергался воздействию влаги или механическим воздействиям. Рекомендуется показать массажер авторизованному сервисному центру

- \* запрещается транспортировать массажер, удерживая за провод
- \* берегите провод от чрезмерного нагревания
- \* запрещается использовать массажер с заблокированными воздушными каналами. Не рекомендуется использовать на мягких поверхностях, таких как кровати и покрывала
- \* запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия массажера
- \* запрещается использовать вне помещений
- \* запрещается использовать в местах распыления аэрозолей и помещениях с ограниченным доступом кислорода
- \* для отключения массажера поверните все контроллеры в положение ВЫКЛ и отключите массажер от питания
- \* массажер оснащен вилок с двумя штекерами (один штекер шире другого). Такая вилка может использоваться с розетками только в одном положении вилки. если вилка не входит в розетку, поверните и попробуйте снова. Если вилка не входит в розетку, обратитесь к электрику для установки подходящей розетки
- \* данный массажер может быть использован только в домашних условиях и внутри помещений

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ  
МАССАЖЕРА ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## СПЕЦИФИКАЦИЯ. ВКЛЮЧЕНИЕ

- \* корпус массажера сделан из ABS пластика. Длительность работы автоматического таймера 15 минут
- \* программирование различных функций вне зависимости, нагревание это или вибрация
- \* красивый внешний вид и удобство для транспортировки

### СПИНА

Помогает снять мышечное напряжение и боль в спине

### ТАЛИЯ

Поддерживает талию в идеальной форме

### БЕДРА

Поддерживает бедра в идеальной форме

### РУКИ

Медленная и интенсивная вибрация помогает поддерживать руки в идеальной форме

### ИКРЫ


Фиксированный уровень вибрации поможет поддерживать ваши икры в тоне

## ВКЛЮЧЕНИЕ



проделайте шаги показанные выше

## РЕКОМЕНДАЦИИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

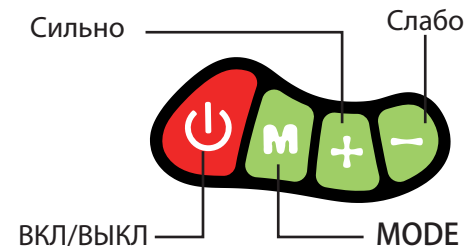

- \* соедините адаптор с массажером, затем, подключите к питанию
- \* закрепите массажер на себе в удобном для вас положении
- \* нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Массажер начинает вибрировать, таймер автоматически установлен на 15 мин. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, чтобы выключить вибрацию
- \* нажав кнопку MODE, вы перейдете в режим настроек, где можете выбрать один из режимов: продолжительная вибрация, прерывистая вибрация, комбинированная продолжительная вибрация, комбинированная прерывистая вибрация



## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если вы не можете устранить неполадку с помощью данной информации, обратитесь в сервисный центр.

неполадка	причина	устранение
Шум	1. Возможно зажим закреплён не совсем плотно. 2. Вибрация самой застёжки	Перестегните зажим. Передвиньте застёжку
Нет движения	1. Нет соединения с питанием. 2. Провод и адаптор не соединены должным образом. 3. Пульт ДУ не работает	1. Переподсоедините снова. 2. Замените батарейку в пульте ДУ
Устройство останавливается	1. Закончился отсчет таймера 2. Встроенная система безопасности отключила устройство	1. Отсоедините устройство на 20 минут. Запустите снова. Устройство должно работать в нормальном режиме

Если в данном списке не отображена неполадка случившаяся с вашим устройством, то следуйте инструкции ниже:

1. Выключите массажер и отключите от питания
2. Оставьте его на 60 минут.
3. Включите его снова и нажмите кнопку POWER.

Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продукция: мини-массажер

Модель: ST-228

Напряжение: DC 12V, 1.5A

Мощность: 18 Вт

Рекомендуемое время использования: 15 мин

Размеры: 140x130x160 мм

Вес: ~0.8 кг



## МИНИ-МАССАЖЕР